



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

# BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

## *Optique Lunetterie*

### E2 – Epreuve Technologique

#### ÉTUDE ET SUIVI DE DOSSIER

## ***DOSSIER RESSOURCES***

Ce dossier comprend :

| Thème                                                                       | Page  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Page de garde                                                               | 1 / 4 |
| <b>DOCUMENT RESSOURCE 1</b> : Dossier client du 02/02/2015                  | 2 / 4 |
| <b>DOCUMENT RESSOURCE 2</b> : Prescription du client du 02/02/2015          | 2 / 4 |
| <b>DOCUMENT RESSOURCE 3</b> : Fiche technique verre EXCEPTIO STYLIS CONVEXE | 3 / 4 |
| <b>DOCUMENT RESSOURCE 4</b> : Fiche technique verre OMEGA EXCEPTIO          | 4 / 4 |



| CODE EPREUVE :<br>1706-OL-T2 |                       | EXAMEN :<br>BACCALAUREAT PROFESSIONNEL                            | SPECIALITE :<br>Optique-Lunetterie |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SESSION<br>2017              | DOSSIER<br>RESSOURCES | EPREUVE : E2 – Epreuve technologique<br>ÉTUDE ET SUIVI DE DOSSIER | Calculatrice<br>autorisée          |
| Durée : 3 h 00               |                       | Coefficient : 3                                                   | Page : 1 / 4                       |

## DOCUMENT RESSOURCE 1

Dossier du 02/02/ 2015

|                                     |                             |                                               |                             |                                          |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| NOM : <b>LE QUESNOY</b>             |                             | Prénom : <b>Catherine</b>                     |                             | Date de naissance : <b>10/08/1982</b>    |                 |
| Profession : <b>infirmière</b>      |                             |                                               |                             |                                          |                 |
| Adresse : <b>5 rue des sorbiers</b> |                             | <b>France</b>                                 |                             | Téléphone : <b>06.12.22.07.55</b>        |                 |
| Date : <b>02/02/2015</b>            |                             | Prescripteur : <b>D<sup>teur</sup> FOREST</b> |                             | Date de l'ordonnance : <b>02/02/2015</b> |                 |
| <b>PRESCRIPTION</b>                 | VL. OD : <b>+10,00</b>      |                                               | VP                          |                                          |                 |
|                                     | VL. OG : <b>+10,00</b>      |                                               | VP                          |                                          |                 |
| <b>PRISES DE MESURES</b>            | <b>Ecart pupillaires VL</b> |                                               | <b>Ecart pupillaires VP</b> |                                          | <b>Hauteurs</b> |
|                                     | OD                          | <b>30</b>                                     | OD                          |                                          | OD <b>20</b>    |
|                                     | OG                          | <b>28</b>                                     | OG                          |                                          | OG <b>20</b>    |
| <b>MONTURE</b>                      | <b>Marque /fabricant</b>    | <b>Modèle</b>                                 | <b>Coloris</b>              | <b>Branche</b>                           | <b>Taille</b>   |
|                                     | <b>OXIBIS</b>               | <b>osiris</b>                                 | <b>05</b>                   | <b>145</b>                               | <b>48 □ 17</b>  |
| <b>VERRES</b>                       | <b>Nom commercial</b>       |                                               | <b>Indice</b>               | <b>Traitements</b>                       | <b>Diamètre</b> |
|                                     | EXCEPTIO STYLIS CONVEXE     |                                               | 1.66                        | Crizal forte UV                          | 60              |
|                                     | <b>OPTIONS</b>              | Précalibrage                                  |                             |                                          |                 |

## DOCUMENT RESSOURCE 2

Docteur FOREST Bastien  
*Ophthalmologiste*  
 6 place de la Bastille  
 62600 BERCK  
 Tél : 03.21.54.66.26  
 ADELI 62.18.0133.1

Berck, le 02/02/2015  
 Madame LE QUESNOY Catherine

**ORDONNANCE DE LUNETTES**

*Une paire de lunettes avec monture :*

**Œil droit :**

**Vision de loin : +10,00 δ**

**Œil gauche :**

**Vision de loin : +10,00 δ**

# STYLIS®

## INFOS PRODUIT

- Unifocal organique sphérique

## INFOS TECHNIQUES


- STYLIS

 1,665 
  1,36 
  32 
  400 
  100% 
  100%

# EXCEPTIO® STYLIS® CONVEXE

## INFOS PRODUIT

- Unifocal organique sphérique à forte puissance et/ou fort prisme
- Antireflet systématique

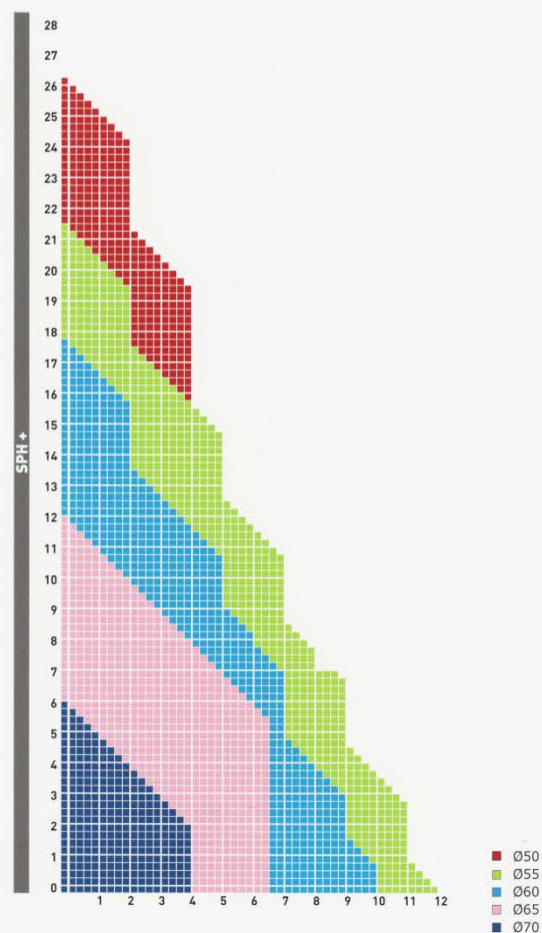

332

## OMÉGA EXCEPTIO®

## INFOS TECHNIQUES

## ■ ORMA

 1,502 
  1,32 
  58 
  355 
  93 % 
  100 %

INFOS INDICATIONS  
ET RECOMMANDATIONS

- Verre destiné aux fortes corrections positives (forts hypermétropes ou aphaques)
- Précäl fortement recommandé
- Traitement UVX recommandé pour les aphaques
- Centrage d'un verre asphérique
- Adaptation : l'équipement doit toujours être positionné le plus près possible des yeux

## OPTIONS DE FABRICATION

- Précäl
- Prismes  $\leq 5 \Delta$
- Prismes  $> 5 \Delta$  nous consulter

## INFOS PRODUIT

- Unifocal organique lenticulaire
  - Asphérisation optique dans la zone centrale et asphérisation géométrique dans la zone périphérique
  - Diamètre total de 67 mm
  - Biconvexe à partir de +23 dioptries

## COMMANDE



- Informations indispensables à toute demande :
  - Imprimé de précalibrage avec forme réelle du calibre, écarts et hauteurs pupillaires

## AVANTAGES

- À correction équivalente, verre plus léger et plus mince qu'un unifocal standard
- Suppression du scotome annulaire
- Montage possible dans une monture classique grâce à une zone périphérique plus mince

## AUTRE TRAITEMENT

- UVX

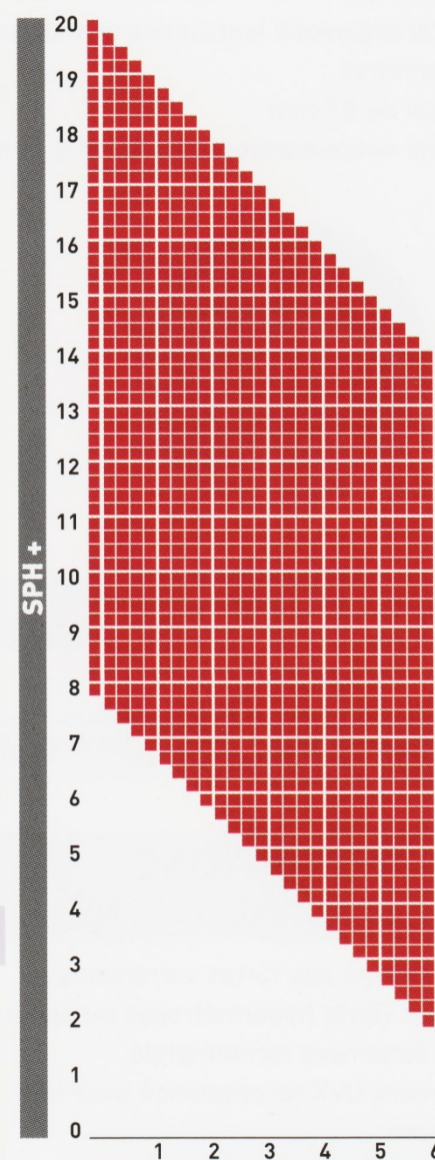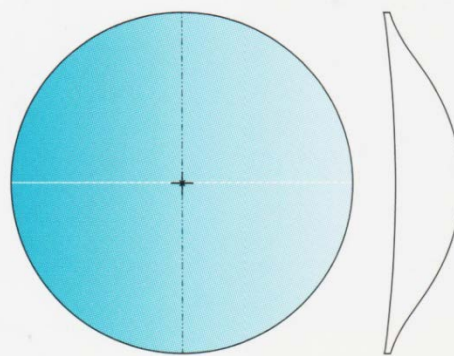

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.