



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

|                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Académie :                                           | Session :                                                            |
| Examen :                                             | Série :                                                              |
| Spécialité/option :                                  | Repère de l'épreuve :                                                |
| Epreuve/sous épreuve :                               |                                                                      |
| NOM :                                                |                                                                      |
| (en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse) |                                                                      |
| Prénoms :                                            | Numéro du candidat                                                   |
| Né(e) le :                                           | (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel) |
| Note :                                               | Appréciation du correcteur                                           |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Baccalauréat professionnel optique lunetterie

E2 - Epreuve technologique

Étude et suivi de dossier

Coefficient : 3                      Durée : 3 heures

Ce dossier est le questionnaire-document réponse.

**Les 6 parties sont indépendantes.**

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

**Sommaire**

|                                                                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Analyse des acuités visuelles.                                                                                          | Page 3 |
| 2. Analyse des résultats obtenus à l'auto-kérato-réfractomètre.                                                            | Page 4 |
| 3. Étude de la vision de près et valeur de l'accommodation à mettre en jeu.                                                | Page 4 |
| 4. Étude de la différence des effets grossissants des verres portés à 15 mm de H et conséquence sur la vision binoculaire. | Page 5 |
| 5. Étude d'un équipement en lentilles de contact.                                                                          | Page 6 |
| 6. Système optique                                                                                                         | Page 7 |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Vous accueillez un nouveau client, muni d'une prescription ophtalmologique (voir ci contre) :

## Problématique

Il s'agit d'un infographiste de 26 ans, récemment embauché par une agence spécialisée dans la réalisation d'animations 3D. Il travaille sur écran face à lui, sur documents et tablette posés sur son bureau à 40 cm. Il ressent des difficultés dans sa nouvelle activité. Il dit avoir du mal à voir le relief créé dans les films qu'il produit et être rapidement gêné (yeux qui piquent et maux de tête) en les regardant. Il porte des lunettes depuis l'âge de trois ans. Son ophtalmologiste lui a régulièrement prescrit de la rééducation visuelle pour : « que les deux yeux travaillent ensemble ».



MEDECINE OPHTALMOLOGIE

7, rue Annie ZOMETROPE  
75 000 PARIS  
Tel : 0120304050

Docteur Jean DIVER

OPHTALMOLOGISTE  
02 1 33342 4 0

PARIS, le mardi 01 juin 2022

Monsieur Eric ASPHE

MONTURE OPTIQUE ET  
VERRES CORRECTEURS UNIFOCALX POUR LA VL

VD : +1,00

VG : +5,00 (– 1,00)<sub>180°</sub>

Ne permet pas la délivrance de médicaments

### MESURES PRÉALABLES

Vous commencez par relever les acuités brutes et compensées, sur des échelles VL et VP qui mesurent des acuités de 1/10<sup>e</sup> à 15/10<sup>e</sup>. Vous les inscrivez dans le tableau :

|            |      | Acuités              |                      |
|------------|------|----------------------|----------------------|
|            |      | VL                   | VP                   |
| Brutes     | OD   | 15/10 <sup>ème</sup> | 15/10 <sup>ème</sup> |
|            | OG   | 10/10 <sup>ème</sup> | 10/10 <sup>ème</sup> |
|            | Bino | 12/10 <sup>ème</sup> | 12/10 <sup>ème</sup> |
| Compensées | OD   | 15/10 <sup>ème</sup> | 15/10 <sup>ème</sup> |
|            | OG   | 12/10 <sup>ème</sup> | 12/10 <sup>ème</sup> |
|            | Bino | 13/10 <sup>ème</sup> | 13/10 <sup>ème</sup> |

Vous réalisez ensuite une auto-réfracto-kératométrie et imprimez les tickets:

RÉFRACTOMÉTRIE

NAME :  
DATE : 11 / 06 / 2022      10 : 30

[REF]      VD : 13.5  
Cyl . Form : ( – )

<R>    SPH      CYL      AX  
+0.50  
S.E.    +0,50

<L>      SPH      CYL      AX  
+ 4.50    – 1,00    180°  
S.E.    + 4.00

PD = 64,0 mm

KÉRATOMÉTRIE

[KER]      Index: 1.337

<R>    R1      R2      AXE  
7.85    7.75    180°

mm    D      AXE  
R1    7.85    43.00    180°  
R2    7.75    43.50    90°

AVG    7.80    43.25  
Cyl      – 0.50    180°

<L>    R1      R2      AXE  
7.90    7.70    180°

mm    D      AXE  
R1    7.90    42.75    180°  
R2    7.70    43.75    90°

AVG    7.80    43.25  
Cyl      – 1.00    180°

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

1. Analyse des acuités visuelles VISION DE LOIN.

1.1. Étude de l'œil droit.

1.1.1. Relever les acuités visuelles en VL.

AV<sub>VL</sub> brute = ..... AV<sub>VL</sub> œil compensé = .....

1.1.2. Indiquer pourquoi ces acuités sans compensation et avec sont identiques.

1.2. Etude de l'œil gauche.

1.2.1. Relever les acuités visuelles en VL.

AV<sub>VL</sub> brute = ..... AV<sub>VL</sub> œil compensé = .....


1.2.2. Indiquer pourquoi l'acuité visuelle sans compensation est légèrement inférieure à celle mesurée avec compensation.

1.2.3. Schémas rétinien de l'œil gauche non compensé.

La compensation prescrite est considérée parfaite : +5,00(-1,00)<sub>180°</sub>


1.2.3.1. Sur le schéma ci-dessous, en VL, l'œil n'accomode pas.

- Placer et nommer les foyers et le cercle de moindre diffusion.
- Coter les 3 valeurs de défocalisation en  $\delta$ .

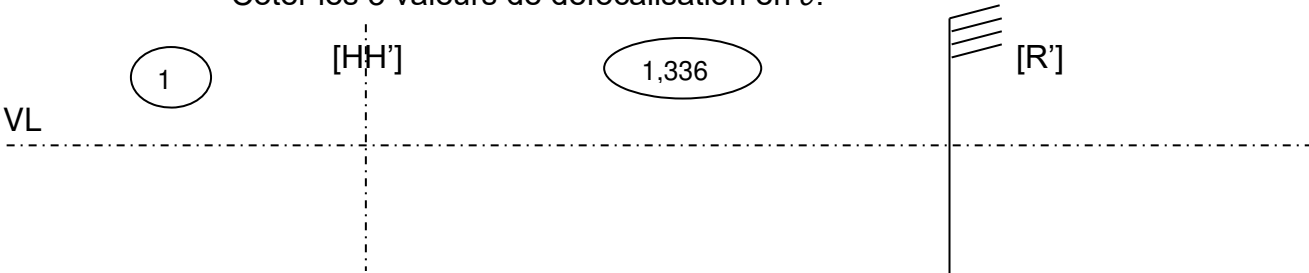

1.2.3.2. Lors de la mesure de l'acuité brute, on considère que l'œil accomode de +4,50 $\delta$ .

- Représenter et nommer les foyers et le cercle de moindre diffusion.
- Coter les 2 valeurs de défocalisation en  $\delta$ .

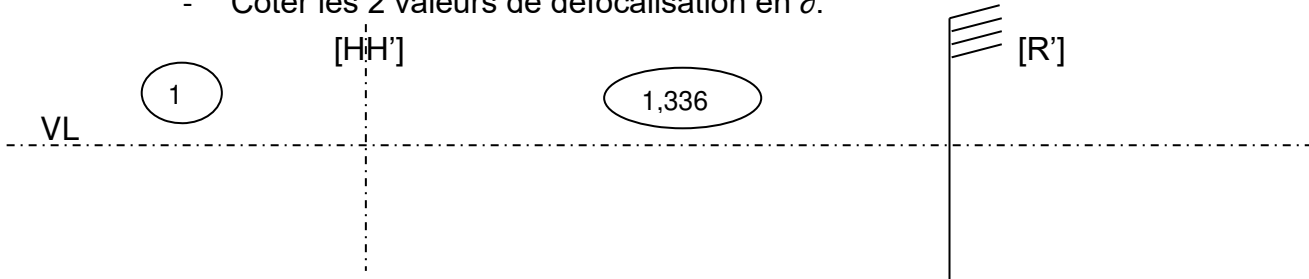

1.3. Acuités binoculaires.

1.3.1. Relever les acuités :

AV<sub>VL</sub> brute = ..... AV<sub>VL</sub> compensé = .....

1.3.2. À l'aide du **document ressource 1** et en comparant les acuités visuelles VL monoculaires et binoculaire, cocher la réponse exacte.

- Avec la compensation, on peut suspecter un dysfonctionnement de la vision binoculaire ☐ OUI ☐ NON

Justifier la réponse, avec les valeurs d'acuités.

1.3.3. À l'aide du **document ressource 2** et les acuités brutes (monoculaires et binoculaire).

1.3.3.1. Indiquer quel est l'œil qui dirige l'accommodation. Justifier la réponse.

1.3.3.2. Déterminer la valeur de l'accommodation mise en jeu par le couple oculaire non compensé en VL. Justifier la réponse.

1.3.3.3. Indiquer pourquoi, lorsque Monsieur Asphe est non compensé, on observe un strabisme de l'OG.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

2. Analyse des résultats obtenus à l'auto-kérato-réfractomètre.

2.1. Mesures de réfractométrie.

2.1.1. Relever les valeurs des compensateurs obtenues à l'auto-réfractomètre.

OD : ..... OG : .....

2.1.2. Indiquer ce qui peut expliquer les différences entre les valeurs de l'auto-réfractomètre et celles déterminées par l'ophtalmologiste considérées parfaites.

2.2. Mesures de kératométrie.

2.2.1. Relever les compensateurs de l'astigmatisme cornéen.

OD : (.....) ..... OG : : (.....) .....

2.2.2. Pour l'OD, comparer et justifier la différence entre l'astigmatisme de kératométrie et l'astigmatisme de réfractométrie.

3. Étude de la vision de près et de la valeur de l'accommodation à mettre en jeu.

3.1. Calcul précis de l'accommodation à mettre en jeu par l'OD pour une vision nette à 40 cm.

Données :  $D_L = +1,00\varnothing$      $\overline{LH} = +15 \text{ mm}$      $\overline{LA} = -40 \text{ cm}$

3.1.1. Calculer la valeur de la réfraction axiale principale (précision  $10^{-2}\varnothing$ ).

3.1.2. Compléter la chaîne des conjugués et calculer la valeur de l'accommodation.

A

$D_L = +1,00\varnothing$

$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$

Ai

$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$

A'≡ R'

-2,50  $\varnothing/L$

..... $\varnothing/L$

-400 mm/L

.....mm/L

.....mm/H

..... $\varnothing/H$

3.2. Indiquer la valeur estimée de l'accommodation, pour une vision à 40 cm. Pour l'estimation, on considère que l'œil compensé est équivalent à un œil emmétrope.

3.3. Indiquer si la vision à 40 cm est nette et confortable pour ce sujet.


L'amplitude d'accommodation est égale à +8,00 $\varnothing$ . La valeur limite de l'accommodation confortable est égale à 2/3 de l'accommodation maximale.

Et conclure quant à la gêne ressentie lors du visionnage des animations 3D en VP, à 40 cm.


NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

M. Asphe explique ressentir des difficultés dans sa nouvelle activité.  
Il dit avoir du mal à percevoir le relief lorsqu'il travaille sur des animations 3D en VP.

4. Étude de la différence des effets grossissants des verres portés à 15 mm de H et de la conséquence sur la vision binoculaire.
- 4.1. Étude graphique des grossissements. Sur le schéma, sans échelle, ci-dessous :
- Les deux yeux sont représentés sur un seul axe, ils sont de même longueur.
  - La tablette est représentée par l'objet AB.
  - Le couple oculaire est compensé : l'OD est compensé par +1,00 $\varnothing$   
l'OG équivalent à un œil sphérique est compensé par +4,50 $\varnothing$ .
- 4.1.1. Calculer les distances focales objets des deux verres et compléter les cotes.
- 
- 4.1.2. **Pour l'OD.** Le conjugué de AB à travers le verre droit est construit (Ai<sub>D</sub>Bi<sub>D</sub>).
- Tracer le rayon issu de Bi<sub>D</sub> jusqu'en H et noter l'angle  $\alpha_D$ , correspondant à la taille angulaire sous lequel l'œil droit voit l'objet.
- 4.1.3. **Pour l'OG.**
- Construire le conjugué de AB à travers le verre, le nommer Ai<sub>G</sub>Bi<sub>G</sub>.
  - Tracer le rayon issu de Bi<sub>G</sub> jusqu'en H et noter l'angle  $\alpha_G$ , correspondant à la taille angulaire sous lequel l'œil gauche voit l'objet.

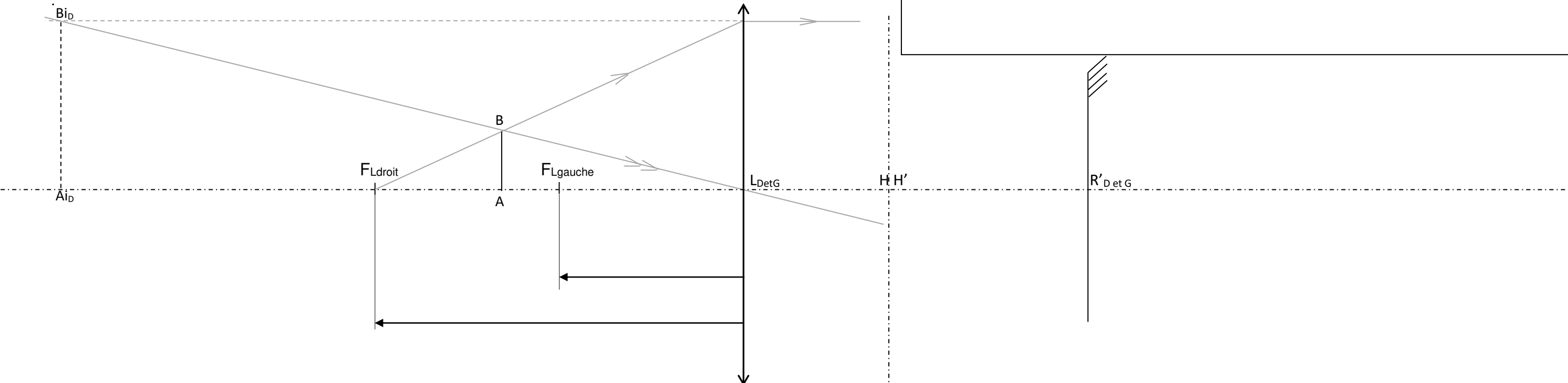

- 4.1.4. Réponses à cocher  
Comparaison des angles sous lequel chaque œil voit l'objet.  
☐  $\alpha_D < \alpha_G$ .    ☐  $\alpha_D > \alpha_G$ .    ☐  $\alpha_D = \alpha_G$ .  
La dimension angulaire de l'objet observé par l'OG est plus ☐ grande ☐ petite que celle de l'OD
- 4.2. Étude par calcul des grossissements.  
L'effet grossissant d'un verre est estimé par la formule  $E \% \approx \overline{LH}_{(cm)} \times D_L$   
Pour le verre droit, avec  $\overline{LH} = +15mm$   $D_{LD} = +1,00\varnothing$ , on trouve  $E\% = +1,5\%$
- 4.2.1. Calculer l'effet grossissant du verre gauche  $\overline{LH} = +15mm$   $D_{LG} = +4,50\varnothing$   
Effet du verre gauche :  $E\% = \dots\dots\dots$
- 4.2.2. Compléter les pointillés par la valeur en %.    Avec le verre, l'OD voit 1,5 % plus gros  
Avec le verre, l'OG voit ..... % plus gros
- 4.2.3. **Document ressource 3.**  
Pour M Asphe, la valeur de l'anisétropie est égale à la différence des effets grossissants.  
Calculer cette différence et conclure quant à la difficulté de perception de la 3D.

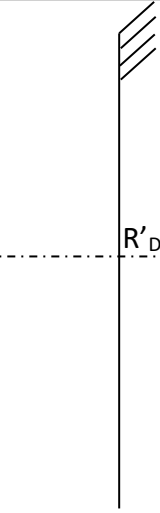




NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

En réduisant la différence de taille entre les images rétiniennes droite et gauche, on améliore la fusion, et donc, à priori, la vision de la 3D.  
On propose à M. Asphe un équipement en lentilles de contact.

5. Étude d'un équipement en lentilles de contact. **Documents ressource 3 et 4.**

5.1. Puissances des lentilles de contact.

5.1.1. Rappeler le principe d'un compensateur parfait par une phrase et compléter la chaîne des conjugués.

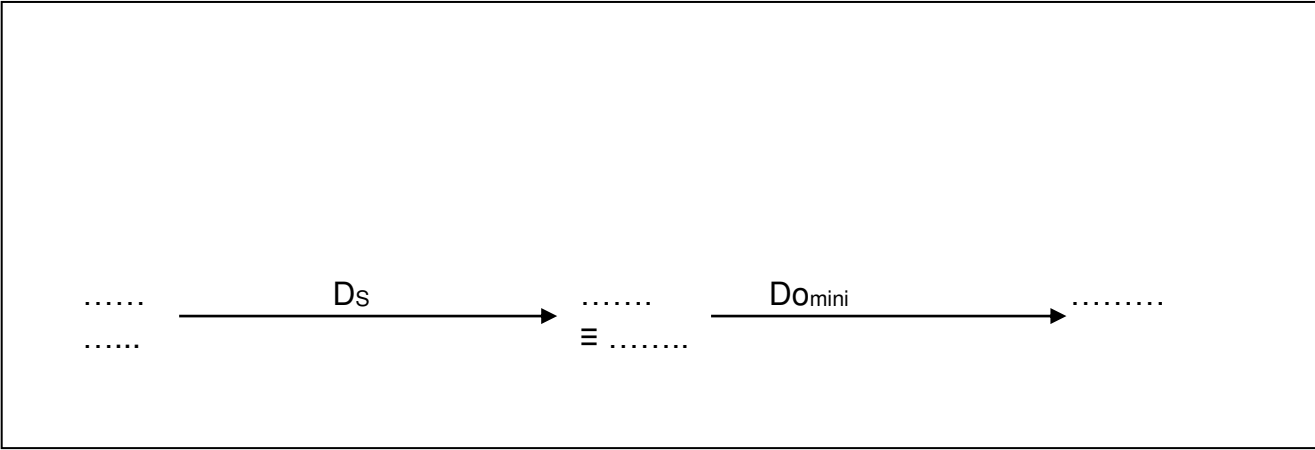

5.1.2. **Pour l'OD**, relever dans la table de conversion la puissance de la lentille :  
 $D_{LC} = \dots\dots\dots$

5.1.3. **Pour l'OG** : la formule du compensateur parfait en lunettes est  $+5,00(-1,00)180^\circ$

5.1.3.1. Indiquer les puissances du verre de lunettes dans chaque méridien  
 $D_{L180^\circ} = \dots\dots\dots$   $D_{L90^\circ} = \dots\dots\dots$  .....

5.1.3.2. Relever, dans la table de conversion, les puissances de la lentille dans chaque méridien :  $D_{SC180^\circ} = \dots\dots\dots$   $D_{SC90^\circ} = \dots\dots\dots$

Et compléter les pointillés ci-dessous par > ou < ou =  
On constate que  $D_{SC} \dots\dots\dots D_L$  car  $SF's \dots\dots\dots LF'L$

5.1.3.3. Noter la formule sphéro-cylindrique de la lentille.  
 $\dots\dots\dots ( \dots\dots\dots ) \dots\dots\dots$

Les lentilles de contact sont positionnées sur la cornée, S étant le sommet cornéen.  
La distance vaut 2 mm.  
La formule d'estimation de l'effet grossissant d'une lentille de contact est alors :

$$E \% \approx \overline{SH}_{(cm)} \times D_{sc}$$

5.2. Avec les données suivantes :  $\overline{SH} = +2 \text{ mm}$   $D_{SCdroite} = +1,00\varnothing$   
 $D_{SCgauche} = +4,75\varnothing$   
OG équivalent à un œil sphérique

Effet lentille droite  $E\% = + 0,2\%$   
Calculer l'effet grossissants de la lentille gauche et conclure quant à la facilité de fusionner ou non les deux images droites et gauche.

Effet lentille gauche  $E\% = \dots\dots\dots$

5.3. Paramètres des lentilles d'essai. **Document ressource 4.**

5.3.1. Indiquer le rayon de courbure moyen de chaque cornée et déterminer le rayon de courbure des lentilles de contact d'essai.

5.3.2. Noter les paramètres des lentilles d'essai à commander


Lentille droite : puissance ..... rayon .....  $\varnothing$  .....  
  
Lentille gauche : puissance ..... rayon .....  $\varnothing$  .....

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE


6. Système optique.

Le client revient chercher ses lunettes et commencer l’adaptation lentilles. Il profite de l’occasion pour vous demander des précisions sur l’utilisation d’un système grossissant qu’on lui a confié (pour la lecture de plans composés de très petits détails). La notice indique qu’il est possible de placer l’instrument à 12,5 cm du document (objet AB) et qu’une fois réglé, il crée une image A’B’ finale dans le même plan, mais 4 fois plus grande. L’instrument est composé d’une première lentille L<sub>1</sub> de vergence D<sub>1</sub> = + 12.00 δ et d’une deuxième L<sub>2</sub> de caractéristique inconnue et de position variable, ce qui permet le réglage. Il souhaiterait savoir où placer L<sub>2</sub> afin d’obtenir le grossissement attendu.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div>6.1. Calculer les distances focales de L<sub>1</sub> et placer les foyers sur l’axe.</div> <div>6.2. Construire l’image intermédiaire A’<sub>1</sub>B’<sub>1</sub>.</div> <div>6.3. Vérifier par calculs la position et la dimension de A’<sub>1</sub>B’<sub>1</sub>.</div> <div>6.4. Positionner l’image finale A’B’, confondue avec AB et 4 fois plus grande.</div> <div>6.5. Rechercher graphiquement la position de la lentille L<sub>2</sub> pour qu’elle assure la conjugaison entre A’<sub>1</sub>B’<sub>1</sub> et A’B’.</div> <div>6.6. Déterminer graphiquement la position du foyer image F’<sub>2</sub> de la deuxième lentille.</div> <div>6.7. Coter la distance focale image de L<sub>2</sub> et calculer la vergence D<sub>2</sub>.</div> | <div>6.1. Distances focales</div> | <div>6.3. Position et dimension de A’<sub>1</sub>B’<sub>1</sub></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | <div>6.7. Vergence D<sub>2</sub></div> <div>ou</div>                  |

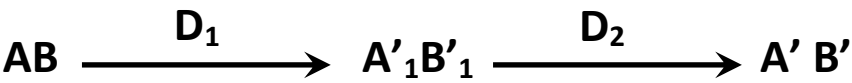

Echelle 1

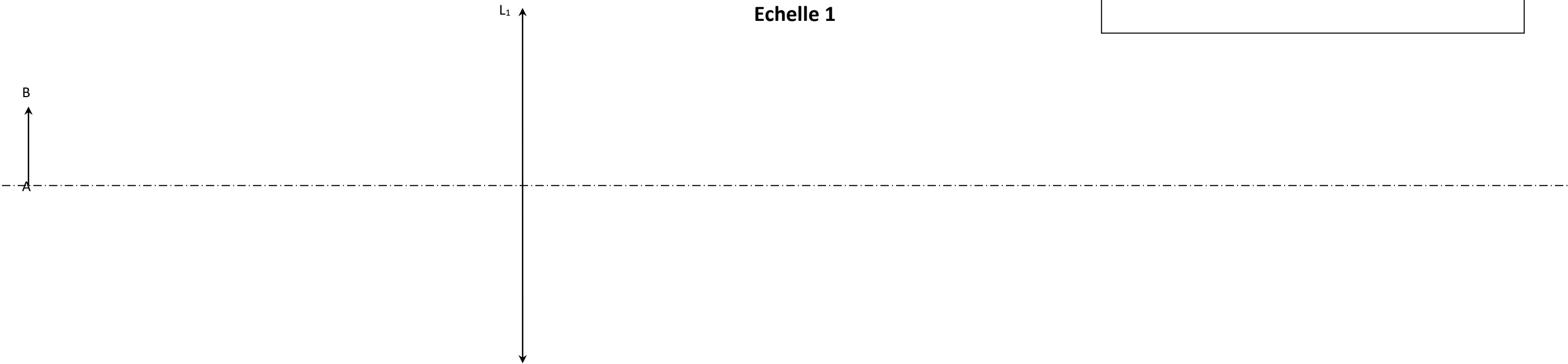



Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.